

A woman with dark hair is lying down, her eyes closed, with her hands near her face. Her skin is illuminated with horizontal rainbow-colored light patterns. She is wearing a white, sheer fabric. To the right, a vibrant red fabric is draped. The background is dark and moody.

VISAGE COSMETIC

presents...

COSMETIC EQUIPMENT

feel the difference

www.visage-cosmetic.at

Revolution in der Hautbehandlung: Radiofrequenz mit Goldenen Mikronadeln

MNRF200 **Microneedling RF**

KAUFPREIS: €3.600,-

Alle Preise inkl. MwSt.

Die Welt der Hautpflege und ästhetischen Behandlungen erfährt aktuell eine bedeutende Entwicklung: Die Radiofrequenz (RF) in Kombination mit goldenen Mikronadeln. Diese innovative Technologie verspricht nicht nur hervorragende Ergebnisse im Kampf gegen Hautalterung, sondern bietet auch eine schonende und effektive Alternative zu invasiveren Behandlungen. Die Mikroneedling Radiofrequenz Maschine stellt sich als Vorreiter dieser avantgardistischen Methode heraus.

Die Radiofrequenz-Mikroneedling-Technologie verwendet ultrafeine, goldbeschichtete Nadeln, die in die Haut eindringen und dabei hochfrequente elektrische Wellen abgeben. Diese Wellen erhitzen die tieferen Hautschichten und stimulieren die Kollagen- und Elastinproduktion, ohne die obere Hautschicht zu schädigen. Das Ergebnis ist eine glattere, strahlendere Haut mit minimierten Falten und verfeinerten Poren.

Warum Gold?

Die Verwendung von Gold für die Mikronadeln hat mehrere Vorteile. Gold ist biokompatibel und hypoallergen, was das Risiko von Hautirritationen oder allergischen Reaktionen minimiert. Zudem verbessert goldene Beschichtung die Leitfähigkeit der Radiofrequenzwellen, was zu einer effizienteren und gezielteren Behandlung führt.

Frequenz und Energielevel

Ein weiteres zentrales Merkmal ist die einstellbare Radiofrequenz und Energielevel. Eine hochwertige Maschine sollte eine Frequenz bis zu 2 MHz bieten können. Durch die Möglichkeit, die Energielevel individuell anzupassen, kann die Behandlung auf die jeweiligen Bedürfnisse und Toleranzgrenzen der Patienten abgestimmt werden.




MNRF200 TECHNISCHE DATEN

Unser RF Maschine ist speziell für die direkte Abgabe von HF-Energie an die Epidermis- oder Dermis-Hautschicht konzipiert. Dadurch wird Kollagen entweder im RF-Mikronadelmodus (invasiv) oder im RF-Matrixmodus (nicht-invasiv) effektiv stimuliert und neu modelliert. Es kann sowohl für epidermale als auch für dermale Anwendungen auf einer Plattform verwendet werden, ohne dass die Betriebsumgebung geändert werden muss.

System-Type	Mono & Bipolar RF Bipolar RF
Frequency	2MHz
Gesamter RF-Behandlungsgrad	Bis Level 10
Dualer Betriebsmodus	Fraktionierte RF-Mikronadel Gebrochener RF-Sublativ
Maximale Energie	50W
Einwegspitze	Micro-Elektrodenadel Micro-Elektrode Typ
Nadeltiefe	0,5 - 4 mm (einstellbar)
Cold-Hammer	-10° C
Display	10.4 inch LCD
Elektrische Voraussetzungen	AC/100-240 V, 50-60 Hz

- Alle Hauttypen
- Dringt problemlos in den Zielbereich ein
- Weniger Nebenwirkungsrisiko
- Leicht steuerbare Tiefe
- Energie direkt zum Zielgebiet ohne Energieverlust

DIE TECHNOLOGIE

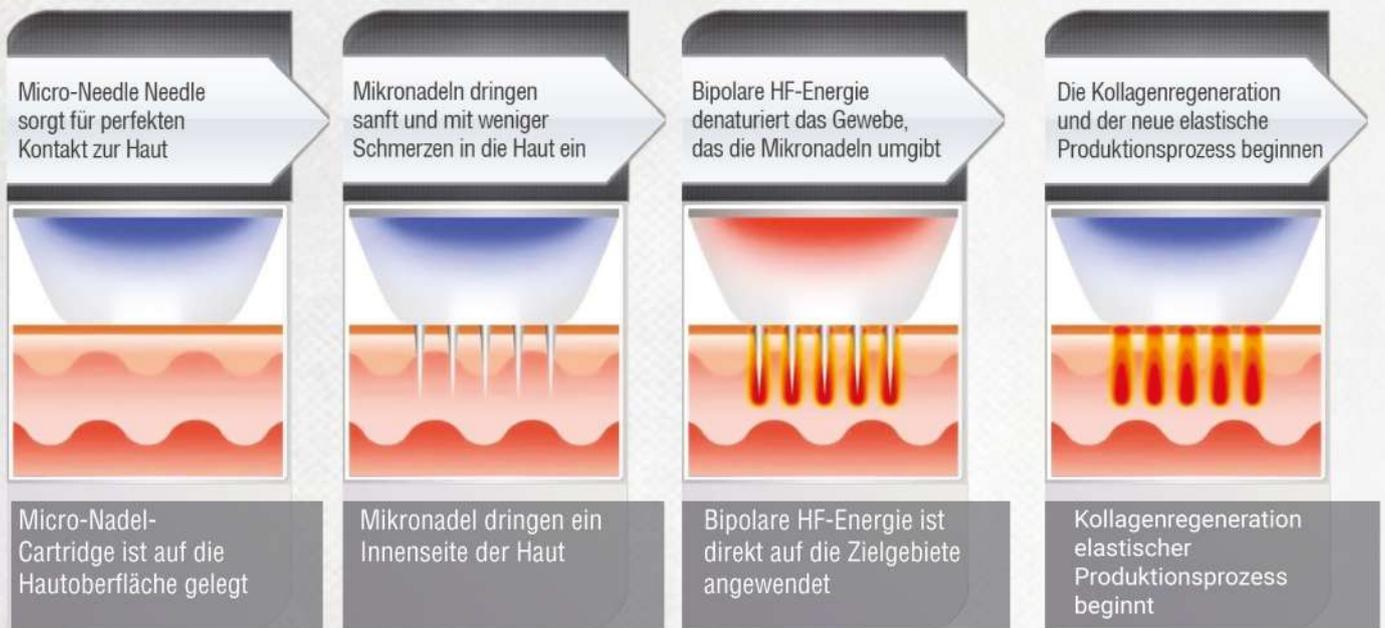

Step 1 Die oberflächliche fraktionierte HF verfügt über zwei einzigartige Kanäle, die kombiniert werden, um eine epidermale Ablation und eine dermale Koagulation bereitzustellen.

Step 2 Der erste Kanal liefert eine tiefere Zone mit kontrolliertem Wärmeeffekt, um Kollagen zu aktivieren und die Haut zu bekämpfen.

Step 3 Der zweite Kanal bietet eine Mikroablation der oberen Schichten der Epidermis und eine milde Koagulation für eine kontrollierte fraktionierte Abheilung und Hautverjüngung mit minimalinvasiver F-Zufuhr.

Step 4 Zusammen bieten die beiden Kanäle 3-dimensionale Behandlungszone für überlegene Hautverjüngung, allgemeine Straffung und konsistente Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können.

1. Verbesserung der Hauttextur und -straffheit: Durch die Stimulation der Kollagen- und Elastinproduktion wird die Hautstruktur straffer und glatter. Dies führt zu einer Reduktion von feinen Linien, Falten und schlaffer Haut.

2. Reduktion von Akne-Narben und anderen Hautunreinheiten: Akne-Narben und andere Hautunreinheiten können durch Mikroneedling Radiofrequenz erheblich gemindert werden, da die tieferen Hautschichten zur Regeneration angeregt werden.

3. Minimierung von Porengröße: Die Behandlung kann auch helfen, die Porengröße zu minimieren, was zu einer gleichmäßigeren Hautoberfläche führt.

4. Förderung eines ebenmäßigen Hauttons: Hyperpigmentierungen und ungleichmäßige Hauttöne können durch die Behandlung ebenfalls verbessert werden.

5. Minimalinvasiv mit kurzer Erholungszeit: Im Gegensatz zu invasiven chirurgischen Eingriffen ist Mikroneedling Radiofrequenz minimalinvasiv und erfordert nur eine kurze Erholungszeit. Patienten können in der Regel innerhalb von wenigen Tagen zu ihren normalen Aktivitäten zurückkehren.

SPEZIFIKATIONEN

1. Goldene Mikronadeln:

Material: Goldbeschichtete Nadeln sind bekannt für ihre biokompatiblen Eigenschaften. Gold reduziert das Risiko von Hautirritationen und Allergien und bietet gleichzeitig eine bessere Leitfähigkeit für die Radiofrequenzenergie.

Länge der Nadeln: Die Nadeln können in verschiedenen Längen eingestellt werden (von 0,5 mm bis 4 mm), um die Behandlung an unterschiedliche Hautzustände und Tiefen anzupassen.

2. Radiofrequenzenergie:

Frequenz: Die Maschine arbeitet normalerweise mit einer Frequenz von 1 MHz bis 5 MHz, was optimal für die Hautstimulation und Kollagenproduktion ist.

Energielevel: Einstellbare Energielevel (0 bis 100 Joule) ermöglichen eine präzise Anpassung der Behandlung an die Bedürfnisse des Patienten.

3. Behandlungsmodi:

Automatisierte Modi: Verschiedene vorprogrammierte Modi für unterschiedliche Hautprobleme, von Faltenreduzierung bis hin zur Narbenbehandlung.

Manuelle Einstellungen: Erfahrene Anwender können die Parameter manuell anpassen, um spezifische Hautbedürfnisse zielgerichtet anzugehen.

4. HUD-Display:

Benutzerfreundliches Interface: Ein hochauflösendes Farbdisplay zeigt alle wichtigen Informationen und ermöglicht eine einfache Navigation durch die Einstellungen.

Echtzeit-Überwachung: Parameter wie Nadellänge, Radiofrequenzenergie und Behandlungsdauer werden in Echtzeit überwacht.

5. Sicherheitsfunktionen:

Hautkontaktsensor: Verhindert die Abgabe von Radiofrequenzenergie, wenn die Nadeln nicht vollständig in Kontakt mit der Haut sind.

Temperaturüberwachung: Überwacht die Hauttemperatur, um Überhitzung zu vermeiden und die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten.

Fazit

Die Microneedling Radiofrequenz Maschine mit goldenen Mikronadeln stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Hautverjüngungstechnologie dar. Die Kombination aus mechanischer Stimulation und thermischer Energie führt zu herausragenden Ergebnissen bei minimalen Risiken und Ausfallzeiten. Mit benutzerfreundlichen Einstellungen und einem breiten Anwendungsspektrum ist diese Maschine ein unverzichtbares Werkzeug für Hautspezialisten und Dermatologen, die ihren Patienten die bestmögliche Behandlung bieten möchten. Die goldenen Mikronadeln erhöhen nicht nur die Wirksamkeit, sondern auch die Sicherheit der Behandlung, wodurch eine flächendeckende Zufriedenheit garantiert ist. Insgesamt erweist sich diese innovative Technologie als wegweisend für die Zukunft der ästhetischen Hautbehandlung.



www.visage-cosmetic.at

VISAGE
COSMETIC